

Микротоковый массажер Marasil 360°

V-образный массажёр микротокового лифтинга Marasil предназначен для процедур в домашних условиях. Уникальный беспроводной аппарат, действие которого направлено против признаков старения кожи: великолепно уменьшает глубину морщин, заметно повышает упругость и тонус кожи, омолаживая и подтягивая её изнутри, обладает прекрасным лимфодренажным эффектом, улучшает кровообращение и микроциркуляцию, так же является прекрасным проводником в кожу питательных компонентов вашей ухаживающей косметики, которую вы будете наносить на кожу перед массажем.

Спецификация

Модель	Kaха-Lift S
Размеры	99×88×22 мм
Вес	66 г
Рабочее напряжение	5V
Мощность	3W
Дополнительно	Инструкция, USB-кабель, салфетка, чехол для хранения

Способ применения

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 сек. кнопку в центре (одно длинное нажатие).
2. Для переключения режима нажмите кнопку в центре еще раз (одно короткое нажатие). LED-индикатор изменит цвет. Индикатор синего цвета обозначает стандартный режим с частотой вибрации 142 Гц. Индикатор красного цвета обозначает тепловой режим с частотой вибрации 200Гц.
3. Для активации микротоков и вибрации расположите палец на индикаторе, находящемся за задней сенсорной панели устройства. Для отключения работы достаточно убрать палец с индикатора.
4. Выберите необходимый вам режим и начинайте процедуру. Перед началом процедуры убедитесь, что вы удалили макияж и другие загрязнения. Для лучшего эффекта можно использовать средства по уходу за кожей лица (крема, сыворотки, масла, гелевые маски и другие косметические ухаживающие средства на водной основе).
5. Серебряные грани массажера являются источником микротоков. Они имеют плавно изогнутые формы, благодаря которым массажер удобно использовать на любом участке лица и тела, учитывая анатомические особенности каждого лица. Прикладывайте массажер любой удобной вам гранью, чтобы он легко скользил по вашему лицу (и другим участкам тела). Ниже, мы даем общие рекомендации по использованию той или иной грани массажера.
6. Для отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в центре около 1 сек. (длинное нажатие). После использования протрите устройство специальной тканью, затем поместите в сухое место.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Для достижения желаемого эффекта перемещайте массажёр по лицу согласно анатомическому расположению мышц на лице (рисунок 2).



Рис. 1



Рис. 2

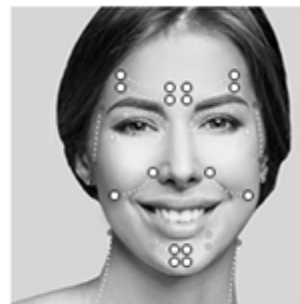


Рис. 3

1. ЧАСТЬ, показанная на рис. 1 предназначена для мышц вокруг глаз, подбородка и губ. Если следовать рис. 2, используя массажёр на левой стороне лица, то для мышц вокруг глаза и губ проведите движением справа-налево описывая круг ← . На правой стороне лица — проведите →слева-направо, описывая круг. Для мышц вокруг подбородка — снизу вверх ↑.
2. ЧАСТЬ, показанная на рис. 1, предназначена для стимулирования массажных точек (методика акупунктуры традиционная азиатская методика иглоукалывания) для снятия стресса. Для данного массажа используйте режим с синим индикатором. Выпуклой областью легко прикоснитесь и сделайте небольшой круг в точках, указанных на рис. 3.
3. ЧАСТЬ предназначена для мышц вокруг щек, лба и области шеи. Следуйте рис. 2. и проведите движением под углом 45 градусов снизу вверх. Для лба проведите движением снизу-вверх ↑. Для шеи — по центру проведите снизу-вверх, слева и справа шеи — сверху-вниз.
4. ЧАСТЬ предназначена для массажа сухожилий. Это традиционный азиатский массаж, позволяющий снять усталость и напряжение. Следуйте рис. 3, проследите чтобы устройство работало в режим с синим индикатором.
5. ЧАСТЬ предназначена для скрабирования. Согласно традиционной азиатской медицине скрабирование стимулирует кровообращение и позволяет избавиться от неприятных ощущений. Процедура очень популярная в Японии и Китае. Эту часть вы можете использовать на любом участке вашего тела, если вы чувствуете боль или неприятные ощущения.

Режимы использования

С синим LED-индикатором предназначен для

- Улучшения цвета лица
- Снятия отчётности и синяков под глазами
- Сужения пор
- Восстановления эластичности и тонуса кожи
- Способствует производству коллагена
- Стимулирует кровообращение и улучшает микроциркуляцию

С красным LED-индикатором + нагрев до 42°C предназначен для

- Лифтинга кожи лица
- Лучшего проникновения в кожу косметических средств по уходу за счет дополнительного нагрева (сыворотка, крем, масло, маски, гель алоэ вера и тд.)
- Сокращения морщин, поднятия мышечного тонуса
- Массажа лицевых мышц
- Способствует производству коллагена
- Стимулирует кровообращение и улучшает микроциркуляцию.

Противопоказания к использования массажера

Острые воспаления на коже (экзема, герпес, пиодермия и т.п.), большое количество родинок и папиллом, царапины и ссадины на коже, беременность, онкологические заболевания, нервно-психические заболевания, так же не рекомендуется использовать в период острых заболеваний организма.