

MÁY TRỊ LIỆU THẤU NHIỆT TẦN SỐ CAO

Tên thương mại: Máy trị liệu Vesta+ Pro

Model : Pro

Hãng sản xuất: Dsmmedi

Xuất xứ: Hàn Quốc

Năm sản xuất 2022 trở về sau

Thiết bị được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016



I. CẤU HÌNH CUNG CẤP


- Máy chính: 01 Chiếc
- Điện cực MFR kiểu khóa đẩy - kéo D1: 01 Chiếc
- Điện cực MFR kiểu khóa đẩy - kéo D2: 01 Chiếc
- Điện cực MFR kiểu khóa đẩy - kéo D3: 01 Chiếc
- Điện cực MFR kiểu khóa đẩy - kéo D4: 01 Chiếc
- Điện cực phẳng rộng C1: 02 cái
- Điện cực phẳng trung bình C2: 02 cái
- Tay cầm RET (V) kiểu khóa đẩy - kéo: 02 Chiếc
- Cáp đơn cực (5 chân) kiểu khóa đẩy - kéo: 02 Chiếc
- Điện cực tấm DFL linh động loại lớn có thể tháo rời được, kiểu khóa đẩy- kéo: 01 Chiếc
- Đầu đa cực (5 chân): 01 Chiếc
- Cáp LF (5 chân): 01 Chiếc
- Găng tay dẫn điện LF: 02 đôi
- Điện cực dán LF 50x50mm: 02 bộ
- Cáp nguồn: 01 Chiếc
- Giá acrylic: 01 bộ
- Kem dẫn RF: 01 hộp
- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

II. ĐẶC ĐIỂM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


1. Đặc điểm

Dsmedi seri VESTA⁺® là một trong những thiết bị đầu tiên kết hợp giải phóng myofascial với nhiệt sâu và kích thích điện sinh học trong một thiết bị duy nhất với một liệu trình đầy đủ:

- **Nhiệt từ năng lượng tần số 2Mhz RF an toàn tuyệt đối**
 - + Không co dây thần kinh cảm giác và vận động và không gây khó chịu bởi chuyển động xoay của các ion
 - + Tăng tốc quá trình sửa chữa
 - + Tăng lưu thông máu, oxy hóa mô và hấp thụ các chất dinh dưỡng
 - + Kích thích dẫn lưu bạch huyết và đào thải
 - + Giải phóng endorphin và giảm đau
- **Công cụ Fascia MFR**
 - + Được thiết kế đặc biệt phù hợp với đặc điểm của các phần cơ thể khác nhau. Chúng có thể kết hợp với thấu nhiệt sâu đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình điều trị.
 - + Kết hợp giải phóng sự kết dính bởi MFR và khôi phục cân bằng mô liên kết quá trình này xảy ra đồng thời và ngay lập tức

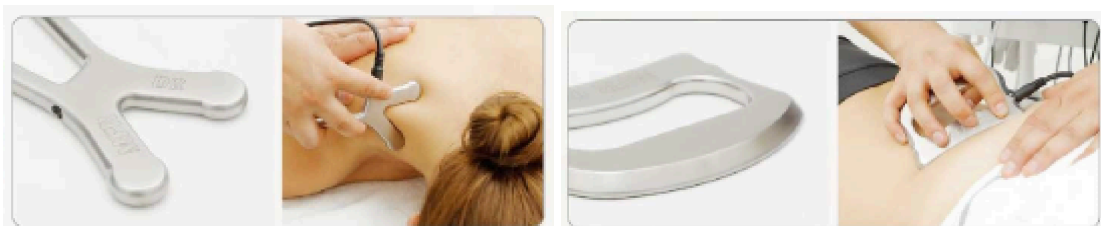


- **Kết hợp giữa công cụ MFR và thấu nhiệt RF**
 - + Đẩy nhanh quá trình đào thải
 - + Giảm đau và đốm xuất huyết khi chỉ dùng dụng cụ MFR không
 - + Không yêu cầu cao về kỹ thuật
 - + Tích cực giải phóng sâu bên trong
 - + Loại bỏ nhanh những hạn chế
 - + Kích thích chữa bệnh tự nhiên
- **An toàn với RF mạnh hơn với tần số 2Mhz**
- **Nhiều chế độ nhiệt sâu RET (Mono, BI, PULSE)**

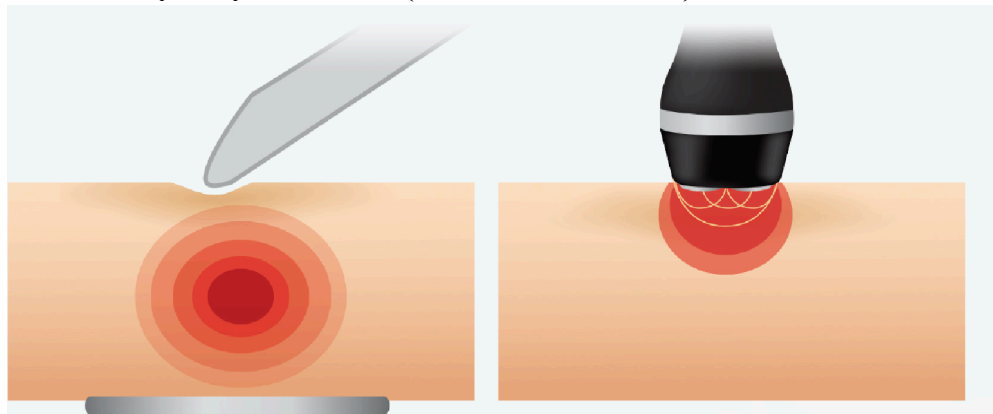

+ Trong khi điều trị các khu vực được kết nối khác, nếu tìm thấy khu vực cần điều trị chuyên sâu, bạn có thể sử dụng Chế độ xung để tập trung vào khu vực đó. Điều này có thể được sử dụng một cách chọn lọc tùy thuộc vào khu vực, và phạm vi của phương pháp và phạm vi điều trị có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các phụ kiện khác cùng nhau.

- **LF (tần số thấp) và tính năng kích thích vi dòng**

+ Thiết bị này được các nhà trị liệu phát minh ra để điều trị năng động đồng thời tạo sự thoải mái cho bệnh nhân và phục hồi nhanh chóng. Bằng cách bổ sung các phụ kiện có thể hoạt động và sử dụng được với độ an toàn đã được xác minh và phương pháp ưu tiên cao, tính năng này cung cấp năng lượng cho người dùng theo nhiều cách khác nhau và tạo ra mô mềm dẻo và đàn hồi hơn cho người dùng.

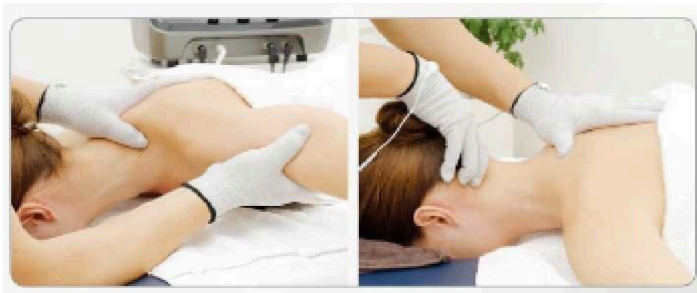

- **Các ứng dụng cơ bản**



+ **Đau và phục hồi chức năng**

- ✓ Giải phóng và phục hồi mô liên kết
- ✓ Đau cấp tính và mãn tính
- ✓ Khớp
- ✓ Chấn thương
- ✓ Viêm gân
- ✓ Đau dây thần kinh
- ✓ Viêm quanh khớp vai thể đông cứng
- ✓ Vết thương
- ✓ Biến dạng
- ✓ Đĩa đệm ...

+ **Giảm căng thẳng và phục hồi sức sống**

- ✓ Cải thiện sự cân bằng và ổn định
- ✓ Hội chứng VDT
- ✓ Hội chứng mệt mỏi mãn tính
- ✓ Đau đầu
- ✓ Tay chân lạnh
- ✓ Giới hạn chức năng

+ **Trong thể thao**

- ✓ Chuẩn bị thi đấu
- ✓ Phục hồi sau thi đấu
- ✓ Điều trị và phòng ngừa chấn thương thể thao
- ✓ Tăng độ đàn hồi cơ bắp
- ✓ Hội chứng quá sức
- ✓ Loại bỏ phù nề nhanh chóng ...

+ **Chống lão hóa và thẩm mỹ**

- ✓ Trước và sau phẫu thuật
- ✓ Loại bỏ chất béo
- ✓ Điều trị sần vỏ cam dạng sọc và mỡ
- ✓ Điều chỉnh cơ thể
- ✓ Phục hồi đàn hồi
- ✓ Giải độc
- ✓ Kích thích hình thành collagen mới
- ✓ Dưỡng ẩm da tốt hơn

2. **Thông số kỹ thuật**

Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ: 10°C – 40°C

Độ ẩm: 30°C – 85°C

Nguồn điện

+ Điện áp AC: 200-400 V

+ Tần số: 50/60 Hz

+ Công suất tiêu thụ: 260 VA

Vật lý:

+ Kích thước: rộng 480 mm x dài 365 mm x cao 164 mm

+ Trọng lượng: 5.06 kg

Thời gian:

+ Cài đặt tối đa 60 phút cho một lần điều trị

+ Thời gian nghỉ tối thiểu 30 phút sau 5 lần chạy tối đa

Tần số RF: 2 Mhz

Đầu ra RF tối đa: 200 W

Chương trình chế độ LF:

+ LF1 – Chế độ tăng cường cơ bắp

+ LF2 – Chế độ thư giãn cơ

+ LF3 – Chế độ lưu thông bạch huyết

+ LF4 – Giảm béo, Aerobic

+ LF5 – Tự động, giảm đau

+ LF6 – Tần số trung bình cho lớp bề mặt

+ LF7 – Tần số trung bình cho lớp sâu