


Памятка по ингаляциям спейсером:

Для ингаляций подходят ветеринарные и медицинские спейсеры с маской для младенцев. Например, Free-breath Baby flow, BabyHaler, Vortex – это медицинские устройства, можно купить в аптеке / на маркетплейсах. Aerocat (Aerodog), SniffUp и аналоги – ветеринарные устройства, приобретаются в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Я отдаю предпочтение SniffUp, он подходит для всех кошек и собак до 10 кг.


Как правильно проводить ингаляции:

1. После покупки баллона-ингалятора с лекарством, баллон нужно тщательно встряхнуть, снять крышку и сделать первый впрыск в воздух. Вы должны увидеть беловатую струю вещества (лекарства). Если вы слышите звук (пшишшш), но струи не видите, повторите тщательное встряхивание.

Перед каждой следующей ингаляцией баллончик нужно встряхивать! Но струю уже в воздух не пускать лишний раз.

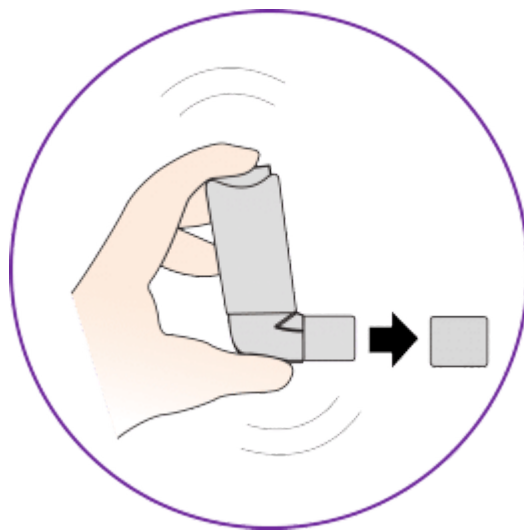

2. Вставьте баллончик в отверстие с обратной стороны спейсера, баллон нужно держать перевернутым.

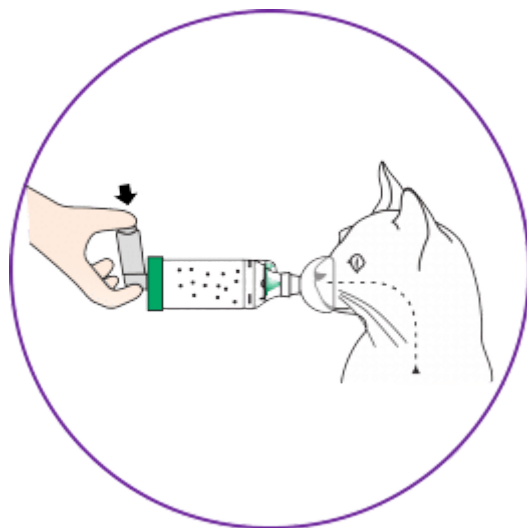

3. Сделайте впрыск в камеру спейсера и только после этого поднесите спейсер к мордочке животного, плотно прислоните и подержите спейсер 15-20 секунд (7-10 вдохов). Не рекомендуется сначала надевать маску и следом делать впрыск, так как баллоны издадут довольно резкий звук + запах, который пугает животных. Интервал между впрыском в камеру спейсера и ингаляцией должен пройти **не более 10-15 секунд**, иначе препарат начнет оседать на стенках прибора.

4. Многие спейсеры оснащены индикатором вдоха (лепесток вдоха), это лепесток в передней части спейсера, который отклоняется или вибрирует при вдохе. Животные умеют задерживать дыхание и этот индикатор поможет убедиться, что ингаляция эффективна. Если ваш

спейсер не имеет индикатора, проследите, чтобы питомец не задерживал дыхания во время ингаляции, либо продлите время удержания маски.

5. Баллончики для ингаляций содержат вещества для **определенного количества доз** (впрысков), при этом сжатого воздуха там больше. Это значит, что после того, как сам **препарат в баллончике закончится, ингалятор продолжит "пшикать"** еще около недели или больше уже без лекарства. Сделайте для себя пометку, **когда вы начали ингаляции** и сколько / до какого дня осталось, тогда вы сможете вовремя сменить баллон.
6. Обязательно аккуратно протереть мордочку салфеткой или детской влажной салфеткой без отдушек после ингаляции, чтобы удалить остатки лекарства.

Приучать к спейсеру нужно постепенно!

Сначала вы просто прикладываете маску к мордочке на несколько секунд и убираете. Так делаете несколько раз за день. Затем на следующий день уже можно подержать подольше, где-то секунд 5-10. Тоже несколько раз за день. И при этом активно наглаживать и хвалить, стараться не фиксировать принудительно, можно даже не брать на руки (делать в естественном положении, когда животное расслабленно лежит). Когда убедитесь, что маску воспринимает спокойно, можно начинать. Сначала нужно сделать 1 пшик рядом с животным в сейсер, не прикладывая маску после этого, можно дать понюхать если захочет исследовать, так пару раз за день и к вечеру или на следующий день попробовать после пшика приложить к мордочке. Не обязательно сразу надолго. Можно начать также с нескольких секунд. И увеличивать время постепенно. Обычно приучение занимает где-то от 2 до 14 дней.

<https://icatcare.org/advice/inhaler-training/> - 5 шагов для приучения кошки к ингалятору.

Уход за спейсером:

Еженедельно мыть и очищать - инструкция по очистке есть к каждому спейсеру. Просушивать на воздухе. Не использовать для мытья и очистки ароматизированные вещества и салфетки.

*Составлено ветеринарным врачом Сизиковой Н.К.
для канала "Записки ветеринара" <https://t.me/ksanvet>*